

# Manual för RSAT:s webbapplikation

*Observera att denna manual är gjord för stand-alone-applikationen som utvecklades innan RSAT integrerades i Region Skånes planeringsverktyg.*

## Startsida

Lifelog Medcare   Steg per dag   Aktivitet   Kalorier   Sömn   Vikt   Lista användare


# RSAT

Region Skåne Activity Tracking



Ovan visas startsidan, längst upp finns en meny där man kan välja mellan olika alternativ.


## Stegdata

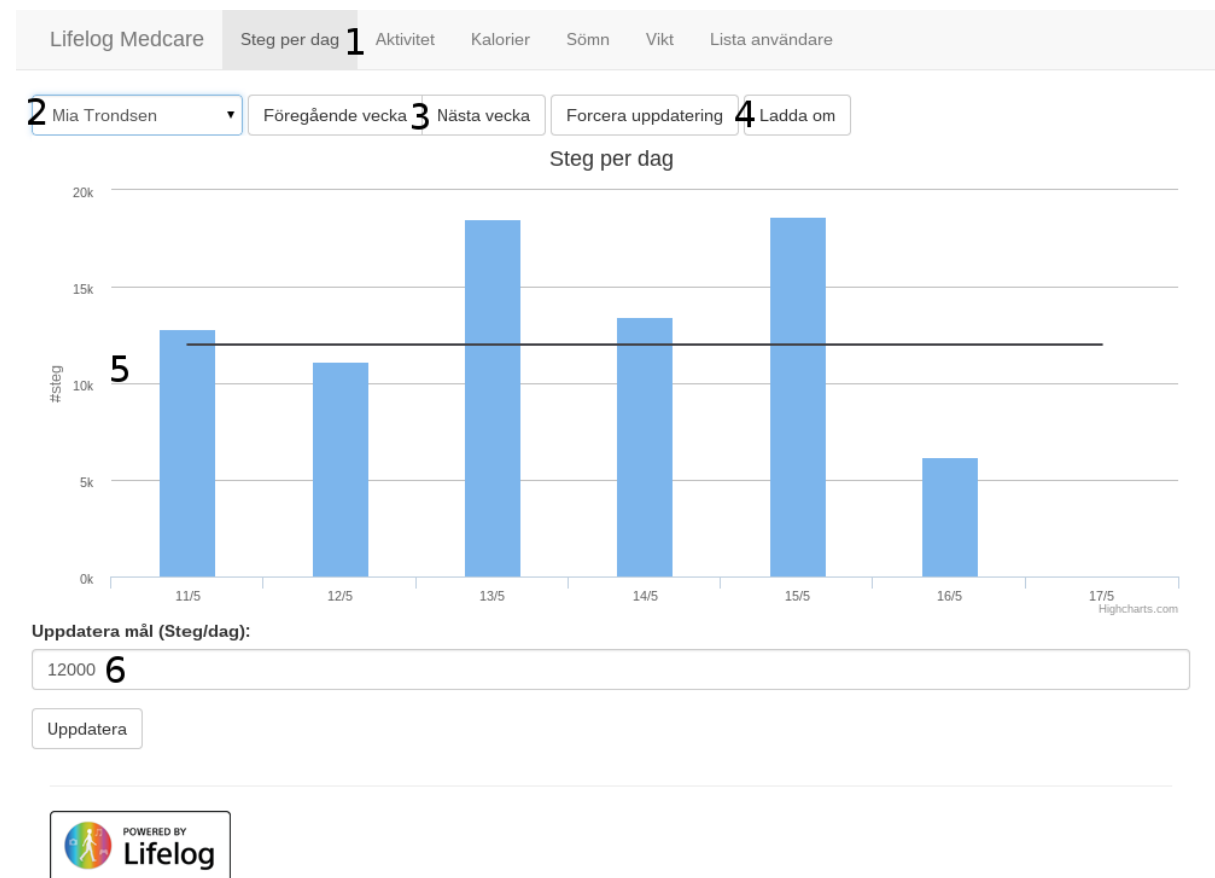

1. I menyn kan man välja vad man vill se på

2. Detta är en rullgardinsmenyn där man kan välja vilken användare man vill se.
3. Dess knapparna använder man för att gå en vecka fram eller tillbaka en vecka i diagrammet.
4. Knappen forcera uppdatering av datan i databasen (Senaste data i Lifelog-molnet hämtas ut och sparas i RSAT:s egen database). Genom att trycka ladda om kan man hämta den senaste datan från databasen och den visas i diagrammet i webbapplikationens vy.
5. Detta diagram visar hur många steg en användare har tagit varje dag i en vecka. Pelarna representerar antalet steg en användare har tagit under den dagen som syns under pelaren. Den svarta linjen är det mål som är satt i RSAT för hur många steg användaren ska gå om dagen.
6. Denna rutan används för att ändra målen, detta görs genom att skiva in det nya målet i textfältet och sedan trycka uppdatera.


## Sömndata

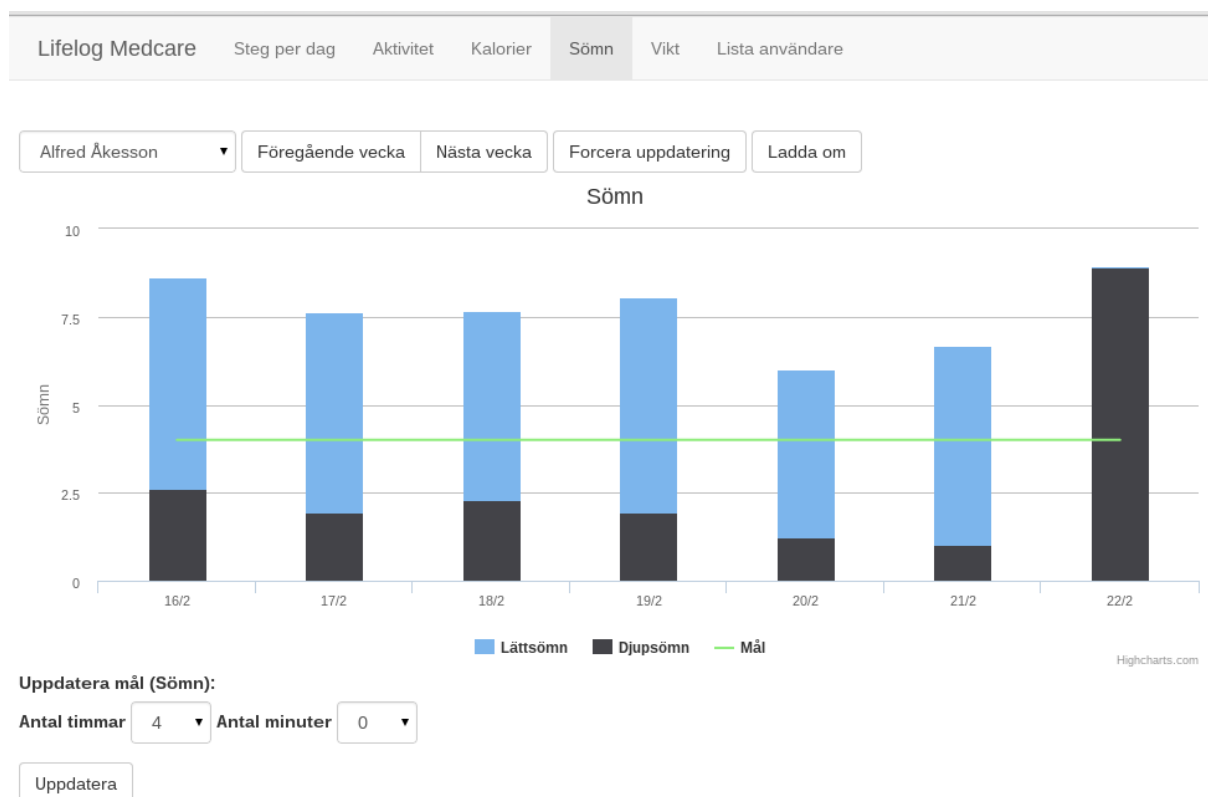

Sömndiagrammet visa antalet timmar en användare har sovit under natten.

De blåa delen av pelarna visa andelen lättsömn och den svarta delen av pelaren visar andelen djupsömn. Den gröna linjen visa målet för hur mycket användaren ska sova under natten.

# Aktivitetsdata

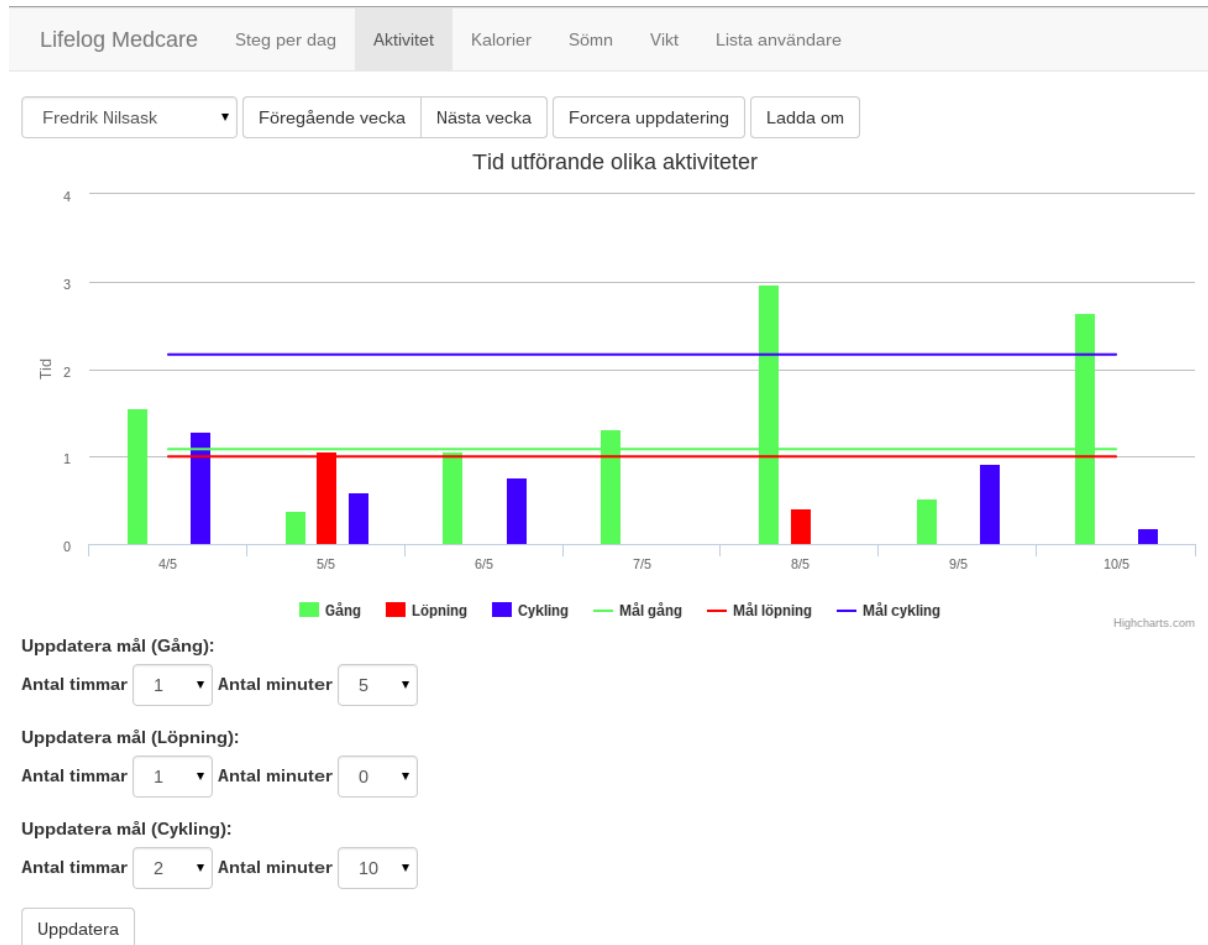

Det finns tre typer av aktivitetsdata för varje användare. Det är hur långt tid användaren går, cyklar och springer varje dag. Gångtid representeras av den gröna pelaren, löptid av den röda pelaren och cykeltid av den blå pelaren. Dessa aktiviteter har också mål som representeras av linjer i samma färg som stapeln för respektive aktivitet. Mål sätts för alla liknade sätt som för steg under diagrammet.

## Övriga datatyper

I kalori finns ett diagram liknade som steg fast med antalet förbrända kalorier per dag. Vikt fliken visar en viktkurva.

## Lista användare

Lifelog Medcare
Steg per dag
Aktivitet
Kalorier
Sömn
Vikt
Lista användare

9. Jens Gustafsson	1	Ändra	Ta bort	2
10. Fredrik Nilsask		Ändra	Ta bort	
11. Mia Trondsen		Ändra	Ta bort	
12. Magnus Wallengren		Ändra	Ta bort	
13. Alfred Åkesson		Ändra	Ta bort	
14. Patient 1		Ändra	Ta bort	
15. tmp		Ändra	Ta bort	
16. tmp2		Ändra	Ta bort	
17. PatientTest100		Ändra	Ta bort	

Lägg till3



I Lista användare ser du en lista över alla användare i systemet.

- Om du trycker på ändra knappen så kan du ändra namn på användaren på den raden på den raden.
- Om du trycker på ta bort knappen tar du bort användaren för den raden.
- Om trycker på lägg till kommer du till en sida där du kan lägga till nya användare.

## Lägg till användare

Lifelog Medcare
Steg per dag
Aktivitet
Kalorier
Sömn
Vikt
Lista användare

Google användarnamn kopplad till telefonen.

Nästa

Skriv in namnet på den användare du vill lägga till och tryckte på nästa. Nu kan du logga in på den användarens Lifelog-konto, antingen via ett Sony- eller Google-konto och däri ge RSAT tillgång till lifelog datan. Efter det blir du tillbakadirigerad till RSAT:s startsida och användaren är tillagd i listan som visas i vyn Lista användare.